

VENEER ÄSTHETIK



DAS PLUS AN MEHRWERT UND SICHERHEIT

artConcept® PLUS ist ein neu konzipiertes Verblendsystem, das die bisherigen Erfahrungen des über viele Jahre bewährten artConcept® mit neuesten technischen Standards zusammenführt.


artConcept® PLUS

- beinhaltet die mehrschichtigen Verblendschalen artVeneer® mit form-, farb- und materialidentischen Eigenschaften, passend zur Zahnserie artegral® und den entsprechenden Individualisierungs- und Ergänzungsmassen, sowie einem farblich abgestimmten Verbundsystem.
- ermöglicht eine perfekte Kombination aus individueller und effizienter Verblendtechnik.
- überzeugt mit dem PLUS an Verbundeigenschaften und Farbsicherheit aller aufeinander abgestimmter Systemkomponenten.

artVeneer® Verblendschalen und PMMA - Kunststoffzähne können mit den artConcept® PLUS Verblendmaterialien individualisiert und auf alle in der Zahntechnik verwendeten Gerüstmaterialien mit Hilfe des neuen artConcept® PLUS Verbundsystems befestigt werden.

INDIKATIONEN / ANWENDUNGSBEREICHE

- ✓ Vollständiger oder teilweiser Zahnverlust
- ✓ Verlust von Zahnhartsubstanz

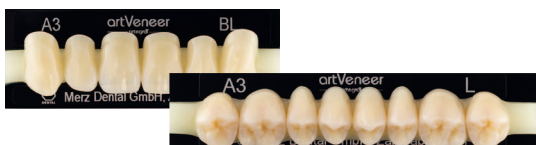

VERWENDUNGSZWECK

Ersatz von verloren gegangener Zahnhartsubstanz durch:

- ✓ Zahnfarbene Befestigung bzw. Hinterlegung von artVeneer® und Kunststoffzähnen
- ✓ Verblendungen bei Teleskop-, Geschiebe-, Steg- und Implantatkonstruktionen mit artVeneer® und artConcept® PLUS System
- ✓ Befestigung von Kunststoffzähnen am Modellguss mit Rückenschutzplatte oder Pontic
- ✓ Individualisierung von Kunststoffzähnen, artVeneer® und CAD/CAM gefertigten Restaurationen aus M-PM® Disc und artBloc® Temp
- ✓ Herstellung provisorischer Kronen und Brücken
- ✓ Reparaturen

MATERIALEIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hohe Verbundfestigkeit
- Hohe Farbbeständigkeit
- Individuell und erweiterbar
- Ästhetisch
- Sehr gute Passgenauigkeit
- Leichte Polierbarkeit
- Hohe Plaquerresistenz dank modernster PMMA-Rezeptur
- Farbstabil durch modernes Katalysatorsystem
- Geprüfte Biokompatibilität

VENEER ÄSTHETIK



DAS PLUS AN MEHRWERT UND SICHERHEIT

WEITERE KOMPONENTEN


| | |
|---------------------------|---|
| artDentine PLUS | kaltpolymerisierender PMMA Kunststoff |
| artEnamel PLUS | Schmelz- und Transpamassen |
| artPrime PLUS | ein moderner Metall Primer für den Metall-Kunststoffverbund - verbessert deutlich die Haftwerte zwischen artPreOpaque PLUS und dem Metallgrüst. |
| artConnect PLUS | ist der verlässliche Bonder für den Verbund zwischen hochvernetzten artVeneer [®] oder Kunststoffzähnen und artDentine PLUS. |
| artPreOpaque PLUS | dient zur Grundierung und Verbesserung des Haftverbundes zwischen artPrime PLUS und artOpaque PLUS und ist optimal bei Verwendung mechanischer Retentionen. |
| artOpaque PLUS | dient zur Abdeckung des Metallgerüsts. |
| artOpaque GUM PLUS | lichthärtender gingivafarbener Pastenopaker und Primer in einem - dient zur farblichen Abdeckung von Metallgerüsten und Retentionen, die den zusätzlichen Einsatz eines Haftverbundsystems erspart. |
| artVeneer wax PLUS | zahnfarbendes Fixierwachs zur Befestigung der artVeneer [®] im Rahmen der Wachsaufstellung und Anprobe. |

LIEFERFORMEN

- TESTset
- MINIset
- STARTset
- Einzelkomponenten
- Display



STEP BY STEP

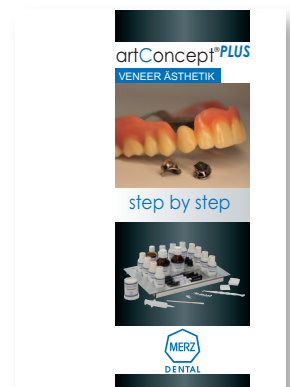

Detaillierte Setkonfigurationen entnehmen Sie bitte unserem Bestellformular
REF 1092378

Arbeitsanleitung
REF 1092370