

## ESTETICA VENEER



## IL PLUS DI VALORE AGGIUNTO E SICUREZZA

artConcept® PLUS è un sistema di rivestimento di nuova concezione, che combina le esperienze fatte finora con artConcept®, sistema ormai consolidato da molti anni, con gli standard tecnici più innovativi.

### artConcept® PLUS

- comprende le faccette a più strati artVeneer® con le stesse caratteristiche per forma, colore e materiale, adatte alla serie di denti protesici argegral®, le corrispondenti masse per individualizzazione e integrazione e anche un sistema adesivo cromaticamente accordato.
- rende possibile una combinazione perfetta di una tecnica di rivestimento estetico individuale ed efficiente.
- convince con il PLUS caratteristiche d'adesione e di stabilità cromatica di tutti i componenti del sistema tra loro perfettamente coordinati.

Le faccette artVeneer® e i denti in resina PMMA possono essere individualizzati con i materiali per rivestimento estetico artConcept® PLUS e fissati su tutti i materiali per strutture utilizzati nel settore odontotecnico con l'aiuto del nuovo sistema adesivo artConcept® PLUS.

### INDICAZIONI / AREE DI APPLICAZIONE

- ✓ Perdita completa o parziale di un dente
- ✓ Perdita della sostanza dura del dente



### UTILIZZO

Sostituzione della sostanza dura del dente andata persa con:

- ✓ Cementazione nel colore del dente o sottofondo di artVeneer® e denti in resina
- ✓ Rivestimenti estetici con artVeneer® e il sistema artConcept® PLUS di corone telescopiche, protesi con attacchi, a barra e su impianti
- ✓ Cementazione di denti in resina allo scheletrato con protezione palatale o elemento intermedio
- ✓ Individualizzazione di denti protesici in resina, artVeneer® e restauri CAD/CAM in M-PM® Disc e artBloc® Temp
- ✓ Realizzazione di corone e ponti provvisori
- ✓ Riparazioni

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata resistenza dell'adesione
- Elevata stabilità cromatica
- Individuale e ampliabile
- Estetico
- Eccellente precisione
- Facile lucidabilità
- Elevata resistenza alla placca grazie alla più innovativa formula del PMMA
- Cromaticamente stabile con un moderno sistema catalizzatore
- Testata biocompatibilità

## ESTETICA VENEER



## IL PLUS DI VALORE AGGIUNTO E SICUREZZA

### WEITERE KOMPONENTEN


<b>artDentine PLUS</b>	resina PMMA polimerizzabile a freddo
<b>artEnamel PLUS</b>	smalto e masse trasparenti
<b>artPrime PLUS</b>	primer innovativo per metalli per l'adesione metallo-resina migliora notevolmente i valori d'adesione tra artPreOpaque PLUS e la struttura in metallo.
<b>artConnect PLUS</b>	è un adesivo affidabile per l'adesione tra artVeneer <sup>®</sup> altamente reticolati o denti in resina e artDentine PLUS.
<b>artPreOpaque PLUS</b>	serve per creare il sottofondo e migliorare l'adesione tra artPrime PLUS e artOpaque PLUS ed è ideale quando si usano ritenzioni meccaniche.
<b>artOpaque PLUS</b>	è indicato per coprire la struttura in metallo.
<b>artOpaque GUM PLUS</b>	opaco in pasta fotopolimerizzabile del colore della gengiva e primer in un unico prodotto - è indicato per coprire cromaticamente strutture in metallo e ritenzioni, senza dover ricorrere ad un sistema adesivo aggiuntivo.
<b>artVeneer wax PLUS</b>	cera di fissaggio del colore dei denti per fissare artVeneer <sup>®</sup> durante il montaggio e la prova.

### FORMA DI CONSEGNA

<input checked="" type="checkbox"/> TESTset
<input checked="" type="checkbox"/> MINIsset
<input checked="" type="checkbox"/> STARTset
<input checked="" type="checkbox"/> Singoli componenti
<input checked="" type="checkbox"/> Display



### STEP BY STEP

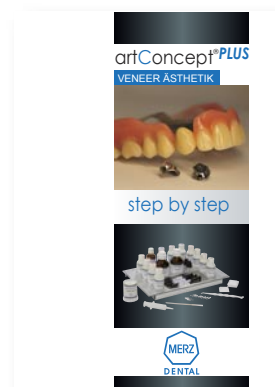

Per configurazioni dettagliate dei set, fare riferimento al nostro modulo d'ordine  
REF 1092378

Istruzioni  
REF 1092370